

# Body Armor® Heel Reliever Hæl-aflastning

Nyhed

Effektiv trykaflastning af hælområdet, specielt for liggende patienter


One-Size-Fits-All



## INDIKATIONER

- > Til forebyggelse og heling af tryksår på hælen, samt til diabetisk fodsyndrom og liggesår
- > Scoring på Braden-skalaen på 14 eller derunder
- > Diabetes med neuropati
- > Ingen palpabel puls i dorsalis pedis-arterien
- > Paraplegi
- > Længerevarende immobilitet eller koma

Findes i to udgaver af den indre skumoverflade, blød og "æggebakke"

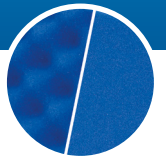

**DARCO**

# Egenskaber og fordele

## Forfods-strop og skumpolstring

- > Holder foden sikkert i ret position
- > Forebygger dropfod
- > Fordeler tryk over et større område
- > Skumpolstring forhindrer kontakt mellem hud og stropper

## Skummateriale med affasede kanter og hjørner

- > Forhindrer tryk fra kanter
- > Hjælper ved lukning med overlap

## Svejsede sømme

- > Giver mindre irritation

## Burrebånds-stropper

- > Nem håndtering
- > Fastholder foden i en komfortabel position
- > Med syede kanter

## Ventilationshuller

- > Forbedrer luftcirkulation
- > Regulerer hudens omgivelser

## Produktmærkning

- > kan skrives på med kuglepen
- > Påført en QR-kode indeholdende brugsanvisning

## Ekstra høj fodsektion

- > understøtter også større fødder
- > Sikrer en opret position af foden
- > Forebygger dropfod
- > Forebygger rotation af foden

## Hælåbning

- > For visuel kontrol af korrekt lejring af hælen

## Lang lægpolstring (30 cm) fikseret til indersiden

- > Overfører belastningen fra hælen
- > Modvirker hyperekstension af knæet

## Glat, friktionsfri ydre overflade

- > Tillader støvlen fri bevægelse i sengen uden at påvirke fodens lejring



Fuldt justerbar  
(One-Size-Fits-All)



Den lange skinnebånd kan overlappes og fikseres for at forbedre tilpasningen. Selv smalle lægge holdes i en stabil position.

Nem tilpasning



Den ekstra skumpolstring, som følger med produktet, giver mulighed for yderligere tilpasning og fordeling af tryk og medvirker til en sikker applikation.

Positionerings-kile



Den medfølgende kile kan anvendes til at modvirke ekstern rotation af benet.

# Individuel tilpasning for optimal behandling

Body Armor® Heel Reliever kan let tilpasses til den enkelte patients behov for målrettet trykaflastning.



Body Armor® Heel Reliever omfordeler trykket på hælen til Achillessenen og lægmusklerne.


Hælområdet er helt fri for alt kontakt-tryk. Hælen "svæver" frit i en trykfri zone.

## Produktliste

### Body Armor® Heel Reliever

---


Kan anvendes til højre eller venstre fod  
Passer til en lægomkreds på 25-54 cm  
Passer skostørrelser op til str. 47

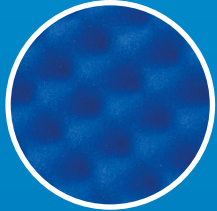

#### "Eggebakke" skum

Den specielt designede indre overflade giver optimal luftcirkulation og medvirker til en behagelig afkølingseffekt.

VARENR.: BAHN-N

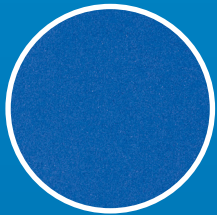

#### Glat skum

Den glatte, bløde indre overflade er udviklet til særlig følsom hud og er især anvendelig for Diabetespatienter. Den medvirker til at forebygge ødemer.

VARENR.: BAHN-F

### Indhold i produktpakken



Polstringsblok til forfod



Positionerings-kile



Ekstra skum blok



#### Vaskepose

Body Armor Heel Reliever kan vaskes ved 60°C i den medfølgende vaskepose.



Axel Madsen Health Care A/S  
Gøngehusvej 252 | 2950 Vedbæk | Telefon +45 45 89 02 25  
info@dk.LRmed.com | www.axel-madsen.dk

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany  
info@darco-europe.com | www.darco-europe.com

